





Profil P87

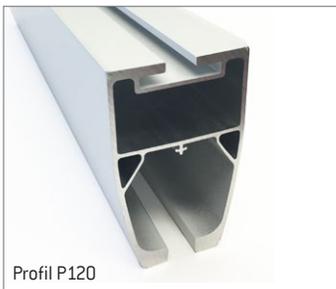

Profil P120

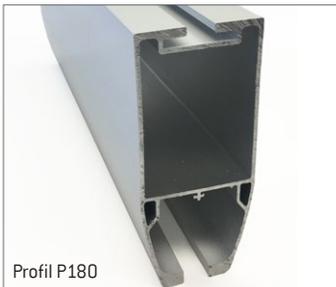

Profil P180

Unsere Schienenprofile bestehen aus stranggepresstem Aluminium und sind in verschiedenen Standardlängen und -profilen erhältlich. Alle Profile sind für eine schnelle und flexible Installation ausgelegt und werden mit einer vollständigen Palette an Befestigungen und Zubehör geliefert. Alle Schienen sind diskret, modern und leicht, wodurch sie viel einfacher zu installieren sind.

Ausgewählte Profile

Unsere Schienen werden in drei verschiedenen Schienenprofilen angeboten. Das Profil P87 wird hauptsächlich für Einschienensysteme oder als Hauptschiene in einem Traversensystem verwendet. Es ist in verschiedenen geraden sowie in gebogenen Längen erhältlich. Das P87 verfügt auch über ein optionales Regalprofil für eingebaute, bündig montierte Installationen. Die Profile P120 und P180 sind beide für die Verwendung als Zusatzschienen in einem Traversensystem oder in Systemen ausgelegt, die große Abstände zwischen den Befestigungspunkten erfordern. Sie sind in Längen von bis zu 7 m/23 Fuß erhältlich.

Diskret und vielseitig

Unsere Schienen sind bereit für unsere Lösung zum Aufladen in der Schiene, die ein kontinuierliches Laden der Lifter ermöglicht. Die einzigartige Installation unserer Technologie erfordert nicht so viele Deckenöffnungen, was Zeit und Geld spart. Die Montage kann unabhängig von der Höhe an Decken, Wänden oder Böden erfolgen.

Komplettes Zubehörsortiment

Unsere Schienensysteme werden mit einer vollständigen Palette an Zubehör geliefert, um den Anforderungen der meisten Montagesituationen gerecht zu werden. Wir bieten Halter, Schienenlaufrollen, Befestigungssätze, Türständer, Pfosten und Ständer an, die alle eine schnelle und einfache Installation garantieren.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
SE-117 43 Stockholm
Tel.: +46 8 665 35 00
Fax: +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
CA-Ottawa, ON K2E 7K1
Tel.: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Tel.: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754 USA
Tel.: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com

Zubehör



Schienenlaufrollen

Verschiedene Modelle für tragbare oder stationäre Lifter. Modell Nr. 20107 abgebildet.



Querrollen

Verschiedene Modelle zur Verwendung mit Traversensystemen. Modell Nr. 50170 abgebildet.



Halter


Verschiedene Modelle und Höhen für die Installation in schallisolierten oder unebenen Decken. Modell Nr. 50190 abgebildet.



Befestigungen


Befestigungssätze für die Montage von Schienen auf verschiedenen Materialien. Modell Nr. 50167 und 50168 abgebildet.

Montageoptionen

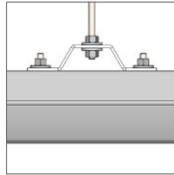


Deckenbefestigung

Für Installationen in Betondecken und Holzbalkendecken oder zusammen mit Haltern. Es ist kein Bohren in Schienen erforderlich.

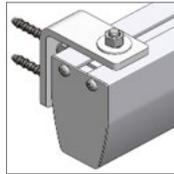


Wandbefestigung

Wenn eine Deckenbefestigung nicht möglich ist, können mit allen Schienen Wandbefestigungen verwendet werden.

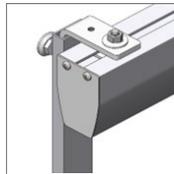

Ständer und Türständer

Ideal für den vorübergehenden Einsatz oder wenn keine Änderungen an der Gebäudestruktur zulässig sind.

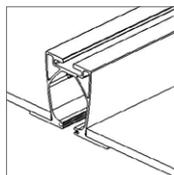

Bündig montiert

Ideal für abgehängte Decken oder Zwischendecken. Kann mit Haltern verwendet werden.

Lifter-Kompatibilität



Cosmos

Kompatibel mit Cosmos. Teile-Nr.: 56100, 56110, 56120



Roomer S

Kompatibel mit Roomer S. Teile-Nr. 55300



HeliQ

Kompatibel mit allen HeliQ-Modellen mit Kraftverstellung. Teile-Nr. 55100, 55110 oder 55120 und 55103, 55140 oder 55150



Altair

Kompatibel mit allen Altair-Modellen. Teile-Nr. 55200, 55210 oder 55220.

Technische Daten

Code	Abmessungen (LxBxH)	Code	Abmessungen (BxHxL)	Code	Abmessungen (BxHxL)	Code	Abmessungen (BxHxL)
P87		P120		P180		P87	
71236	250 cm x 7 cm x 8,7 cm 98,4 Zoll x 2,7 Zoll x 3,4 Zoll	71241	300 cm x 7,3 cm x 12 cm 118,1 Zoll x 2,9 Zoll x 4,7 Zoll	71245	550 cm x 7,3 cm x 12 cm 216,5 Zoll x 2,9 Zoll x 4,7 Zoll	55601	Kurve 45°
71237	300 cm x 7 cm x 8,7 cm 118,1 Zoll x 2,7 Zoll x 3,4 Zoll	71242	400 cm x 7,3 cm x 12 cm 157,5 Zoll x 2,9 Zoll x 4,7 Zoll	71246	700 cm x 7,3 cm x 12 cm 275,6 Zoll x 2,9 Zoll x 4,7 Zoll	55602	Kurve 60°
71238	400 cm x 7 cm x 8,7 cm 157,5 Zoll x 2,7 Zoll x 3,4 Zoll	71243	500 cm x 7,3 cm x 12 cm 197 Zoll x 2,9 Zoll x 4,7 Zoll			55603	Kurve 90°
71239	550 cm x 7 cm x 8,7 cm 216 Zoll x 2,7 Zoll x 3,4 Zoll	71244	620 cm x 7,3 cm x 12 cm 244,1 Zoll x 2,9 Zoll x 4,7 Zoll			55604	Kurve 90° lang Gerader Abschnitt 100 cm
71240	700 cm x 7 cm x 8,7 cm 275,6 Zoll x 2,7 Zoll x 3,4 Zoll						
Gewicht des Produkts: 3,2 kg		Produktgewicht: 4,4 kg		Produktgewicht: 4,9 kg		Produktgewicht: 3,2 kg	



Wir verbessern die Bewegungsfreiheit und die Pflegequalität für Menschen.